

Arthroset

415-2020, 415-2025



Arthroset


Artroskopikanylset är designat för att ge maximalt, oavbrutet, utflöde av ledvätska vid artroskopiska ingrepp. Kanylen, som är försedd med en mandrin, är enkel att föra in via ett litet snitt i knäleden. Anslutningar och slang har samma diameter som kanylen för att ge optimalt vätskeflöde. Kanylen är försedd med ett flertal dränagehål samt bibehåller sin diameter även då den är böjd, vilket minskar risken för blockerat flöde. Sterilförpackningen inkluderar kanyl, mandrin i rostfritt stål, slang med rullklämma och anslutningsnippel samt Luer-adapter som möjliggör sköljning med salinlösning.

Artroskopisetet finns i två olika storlekar, med 2,5 eller 4,0 mm innerdiameter.

415-2020, 2,5 mm innerdiameter.

415-2025, 4,0 mm innerdiameter.

Material PVC, Rostfritt stål

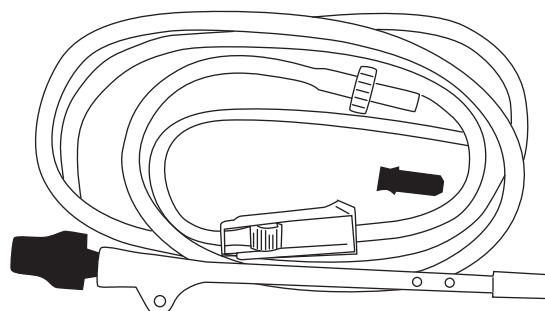

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
415-2020	54 g	20 st	80 st	5 kg
415-2025	70 g	20 st	80 st	6 kg

