



# SpecuLume Medium

Powered by Cyalume

7-W67552




# SpecuLume Medium Powered by Cyalume

SpecuLume är ett osterilt självhållande vaginalspekulum för engångsbruk. Efter insättning kan Spekulum fixeras i önskad vinkel genom att justera den tysta och enkla låsanordningen. Klämskydd är placerade på baksidan av den nedre skeden som blockerar klyftan mellan den övre och nedre skeden och skyddar patienten när den övre skeden sänks. Detta är en unik funktion som inte finns i andra spekulum. Ljusinsättning kan placeras på övre eller nedre skeden för att möjliggöra flexibilitet för läkaren för optimal ljusbelysning beroende på deras speciella önskemål eller behov. SpecuLume finns i storlekarna small, medium, large.

- Starkare än andra engångsartiklar
  - Optimal öppningsvidd
  - Klämskydd
  - Tyst och säker låsning
  - Unik ljuskälla genererar ingen värme.
  - Ljusinsats redo i ett "snäpp" utan att behöva el eller batterier.
  - Kemiluminescerande insats ger optimal distribuerad belysning i 15 minuter, vilket eliminerar hård belysning.
- Smälttemperatur: 100 °C
  - Ej autoklaverbar
  - Latexfri

## Material PS/ABS/PC + material i ljuskällan

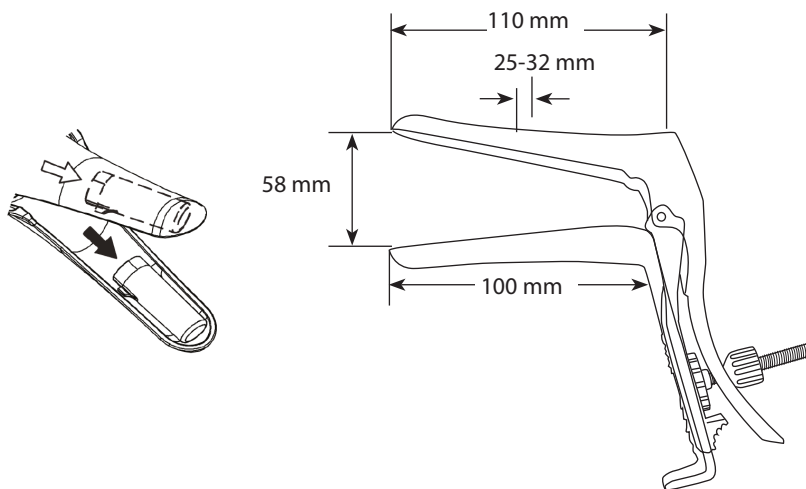

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
7-W67552	43 g	25 st	100 st	7 kg

