

Hegenberger Retractor®

A1390






Hegenberger Retractor®

Hegenberger Retractor® är ett sterilt engångshjälpmedel i plast för postpartediagnoser och sutureringar. Den ergonomiska designen gör behandlingen intuitiv och minimerar patientens obehag. Hegenberger Retractor® ger fri sikt av arbetsområdet och stannar på plats självmant, vilket frigör händerna för suturering och eliminerar behovet av en assistent för att hålla området öppet. Hegenberger Retractor® kan placeras upprätt för suturering av bakre vaginala sår eller vinklas för suturering av sidosår eller episiotomier. Levereras i steril förpackning. Använd ej produkt tillsammans med Glidgel. För bästa resultat använd kompress eller tampong för uppsugning av blod eller överflödigt vätska.

- Fri fri sikt av sutureringsområdet
 - Högre kvalitet på sutureringen
 - Reducerar patientens stressnivå
 - Reducerar behov av omsuturering
 - Snabbare sutureringstid
 - Ingen begränsad hållning under suturering
 - Minskar behovet av personal per suturering
 - Minskad risk för nålsticksskador
- Smälttemperatur: 100 °C
 - Ej autoklaverbar
 - Latexfri

Material: High-impact Polystyren (HIPS)

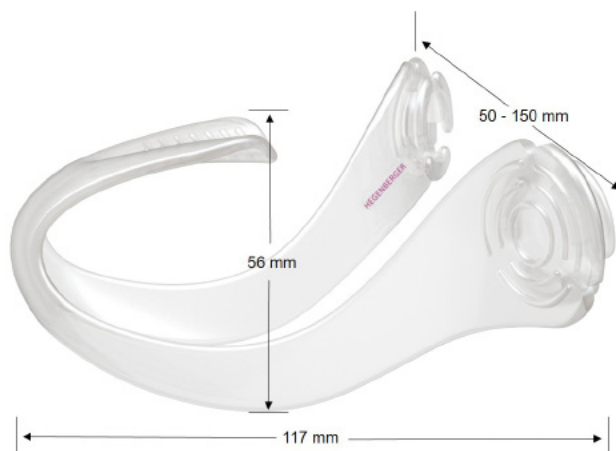

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.PACKNING
A1390	35 g	10 st	40 st	12 kg

