

Esa Sound

35908




Esa Sound

Uterussound är avsedda för att sondera en kvinnas livmoder genom livmoderhalsen, för att mäta längden och riktningen av livmoderhalskanalen och livmodern, för att bestämma nivå av dilatation, eller för att inducera ytterligare dilatation. Uterinsondering kan utföras före embryoöverföring för att bestämma livmoderdjupet och hur lätt en embryoöverföringskateter kan föras genom livmoderhalsen. Det utförs innan en intrauterin enhet sätts in (IUD) för att mäta längden och riktningen av livmoderhalskanalen och livmodern. Detta minskar risken för perforering av livmodern med spiralen. Detta kan inträffa när spiralen är för djupt in eller i fel vinkel.

- Flexibel
 - Tydlig måttangivelse 5 - 12 cm
 - Latexfri
 - Greppvänlig
 - Steril
- Smälttemperatur: 90-100 °C
 - Ej autoklaverbar
 - Latexfri

Material Polymeren (HDPE)

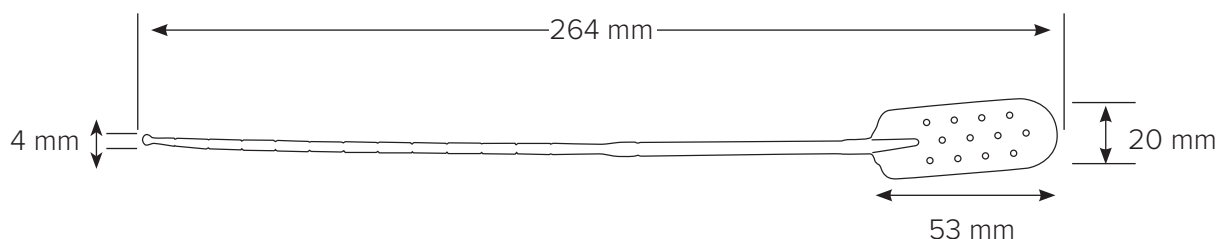

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
35908	10,5 g	1 st	50 st	525 g

